

**Multi-Gyn
CalmingCream
Netherlands, Belgium**


karo
pharma

Reason for change: **Rebranding**
Correction round: v1
Status: **IN PROGRESS**


KARO code: 2002114_2
Previous code: 2002114_1
CMO code: 77261911
Component type: Leaflet
Language: Dutch, French, German
Pharma code: 596

Dimensions (HxW): 230 x 150 mm
Machine drawing ID: XXXXXX
Material: ?


Print colours:

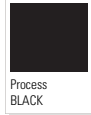

Onlay:

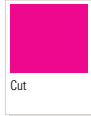

ATTENTION:

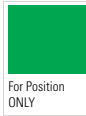

If this supporting colour swatch is present it means **the artwork is still in progress** and therefore its content and technical specs are not ready for reproduction.

Multi-Gyn® CalmingCream



NL

LEES DIT INFORMATIEBLAD VOORDAT U MULTI-GYN CALMINGCREAM GEBRUIKT EN BEWAAR VOOR NASLAG.

Multi-Gyn CalmingCream verlicht en kalmeert de intieme huid

- Verlicht direct en kalmeert geïrriteerde, droge en jeukende intieme huid
- Ondersteunt de natuurlijke huidbarrièrefunctie
- Niet-irriterend en zonder parfum
- Geschikt voor dagelijks gebruik

Indicatie

Onze intieme huid is gevoelig voor irritatie, waardoor het tijd is voor kalmerende verlichting.

Multi-Gyn CalmingCream kalmeert, verlicht en beschermt geïrriteerde, droge en jeukende huid in de intieme zone, veroorzaakt door o.a. scheren/waxen, kleding, transpiratie of zeep. Het 2QR-complex ondersteunt de natuurlijke huidbarrière van de intieme huid, voor intieme gemoedsrust.

De crème kan ook gebruikt worden in combinatie met producten voor de verlichting van inwendige vaginale ongemakken, zoals Multi-Gyn ActiGel en Multi-Gyn FloraPlus.

Let op: Multi-Gyn CalmingCream behandelt geen vaginale schimmel of bacteriële vaginose.

Werking Multi-Gyn CalmingCream

Multi-Gyn CalmingCream is specifiek ontwikkeld om de intieme huid te hydrateren, te verzachten en te beschermen. De crème is op basis van het 2QR-complex, dat de natuurlijke barrièrefunctie van de intieme huid ondersteunt.

Gebruiksaanwijzing

Multi-Gyn CalmingCream is bedoeld voor uitwendig gebruik op de huid net buiten de vagina en rond de anus. Breng 1x per dag of wanneer directe verlichting gewenst is een dun laagje crème aan. Geschikt voor dagelijks gebruik. Bewaren bij 10-25°C.

Multi-Gyn CalmingCream is op basis van natuurlijke ingrediënten

Multi-Gyn CalmingCream bevat het 2QR-complex, dat een natuurlijke oorsprong heeft. Bevat geen parfum, hormonen of producten van dierlijke oorsprong.

Ingredients

Aloe Barbadosensis Leaf Extract Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Cera Microcrystallina, Cetearyl Ethylhexanoate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Hoofdingrediënt 2QR-complex: gezuiverd uit Aloe Barbadosensis bladextract.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van Multi-Gyn CalmingCream tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Meer informatie op www.multi-gyn.nl of www.multi-gyn.be

Achtergrondinformatie

Veel vrouwen zullen het herkennen: irritatie, droogheid en jeuk van de huid in de intieme zone. Ongemakken in de intieme zone kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals scheren/waxen, kleding, transpiratie of het gebruik van zeep. Vaak zijn deze ongemakken niet ernstig genoeg om mee naar een specialist te gaan. We verwachten dat de problemen vanzelf overgaan en dat is vaak ook zo. Maar soms kan dit even duren en wordt het ondertussen behoorlijk vervelend. Multi-Gyn CalmingCream is een effectieve oplossing op basis van natuurlijke ingrediënten voor dit soort ongemakken.

FR

VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT D'INFORMATION AVANT D'UTILISER MULTI-GYN CALMINGCREAM ET CONSERVEZ-LE POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE

Multi-Gyn CalmingCream soulage et apaise la peau de la zone intime

- Soulage et calme immédiatement la peau de la zone intime en cas d'irritation, de sécheresse et de démangeaisons
- Soutient la fonction de barrière naturelle de la peau
- Non irritant et sans parfum
- Convient à un usage quotidien

Indication

La peau de la zone intime est sensible aux irritations et nécessite donc parfois un soulagement apaisant.

Multi-Gyn CalmingCream apaise, soulage et protège la peau de la zone intime en cas d'irritation, de sécheresse et de démangeaisons, causées notamment par le rasage/l'épilation, les vêtements, la transpiration ou le savon. Le complexe 2QR soutient la barrière cutanée naturelle de la zone intime, pour une sérénité intime. La crème peut également être utilisée en combinaison avec des produits destinés au soulagement des inconforts vaginaux internes, comme Multi-Gyn ActiGel et Multi-Gyn FloraPlus.

Attention : Multi-Gyn CalmingCream ne traite pas les mycoses vaginales, ni la vaginose bactérienne.

Action de Multi-Gyn CalmingCream

Multi-Gyn CalmingCream a été spécialement développé pour hydrater, adoucir et protéger la peau de la zone intime. La crème est à base de complexe 2QR, qui soutient la fonction de barrière naturelle de la peau de la zone intime.

Instructions d'utilisation

Multi-Gyn CalmingCream est destiné à un usage externe sur la peau juste en dehors du vagin et autour de l'anus. Appliquer une fine couche de crème 1x jour ou lorsqu'un soulagement immédiat est souhaité. Convient à un usage quotidien. À conserver à une température comprise entre 10 et 25 °C.

Multi-Gyn CalmingCream est à base d'ingrédients naturels

Multi-Gyn CalmingCream contient le complexe 2QR, qui est d'origine naturelle. Ne contient ni parfum, ni hormones, ni produits d'origine animale.

Ingredients

Aloe Barbadensis Leaf Extract Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Cera Microcrystallina, Cetearyl Ethylhexanoate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principal ingrédient : complexe 2QR, purifié à partir d'extrait de feuilles d'Aloe barbadensis.

Grossesse et allaitement

Il n'existe pas de contre-indications connues à l'utilisation de Multi-Gyn CalmingCream durant la grossesse ou l'allaitement.

Plus d'informations sur www.multi-gyn.nl ou www.multi-gyn.be

DE

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG VON MULTI-GYN CALMINGCREAM SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLÄGEN AUF.

Multi-Gyn CalmingCream beruhigt und schützt die Intimhaut

- Sorgt für sofortige Erleichterung bei gereizter, juckender und trockener Haut im Intimbereich
- Unterstützt die natürliche Barrierefunktion der Haut
- Mild und parfümfrei
- Für die tägliche Anwendung geeignet

Indikation

Gereizte, trockene und juckende Haut im Intimbereich?

Multi-Gyn CalmingCream beruhigt, lindert und schützt gereizte, trockene und juckende Haut im Intimbereich, die durch Rasieren/Wachsen, enge Kleidung, Schweiß oder Seife verursacht wird. Der 2QR-Komplex unterstützt die natürliche Barrierefunktion der Intimhaut und sorgt so für ein unbeschwertes Gefühl im Intimbereich.

Die Creme kann auch in Kombination mit Produkten zur Linderung innerer vaginaler Beschwerden, wie Multi-Gyn ActiGel und Multi-Gyn FloraPlus, verwendet werden.

Bitte beachten: Multi-Gyn CalmingCream ist nicht zur Behandlung von Scheidenpilz oder bakterieller Vaginose geeignet.

Wie Multi-Gyn CalmingCream wirkt

Multi-Gyn CalmingCream wurde speziell dazu entwickelt, die Intimhaut mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu pflegen und zu schützen. Die Creme basiert auf dem 2QR-Komplex, der die natürliche Barrierefunktion der empfindlichen Intimhaut unterstützt.

Gebrauchsanweisung

Multi-Gyn CalmingCream ist zur Anwendung auf der Haut außerhalb der Vagina und rund um den Anus bestimmt. Tragen Sie eine dünne Schicht der Creme einmal täglich auf oder immer dann, wenn Sie Erleichterung wünschen. Für die tägliche Anwendung geeignet. Lagerung bei 10-25 °C.

Multi-Gyn CalmingCream basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen

Multi-Gyn CalmingCream enthält den 2QR-Komplex, der natürlichen Ursprungs ist. Sie ist frei von Duftstoffen, Hormonen und Produkten tierischen Ursprungs.

Informations contextuelles

reconnaîtront ces signes que sont l'irritation, la sécheresse et les démangeaisons de la peau de la zone intime. Les inconforts au niveau de la zone intime peuvent être dus à différentes causes, telles que le rasage/l'épilation, les vêtements, la transpiration ou l'utilisation de savon. Souvent, ces inconforts ne sont pas assez sévères pour aller consulter un spécialiste, et on attend leur disparition spontanée, ce qui arrive souvent. Néanmoins, cela peut prendre du temps et ces inconforts sont assez gênants en attendant. Multi-Gyn CalmingCream est une solution à base d'ingrédients naturels, efficace contre ce type d'inconforts.

Ingredients

Aloe Barbadensis Leaf Extract Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Myristate, Cera Microcrystallina, Cetearyl Ethylhexanoate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Citric acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Hauptinhaltsstoff 2QR-Komplex:

Gereinigt aus Aloe Barbadensis-Blattextrakt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen für die Verwendung von Multi-Gyn CalmingCream während der Schwangerschaft oder Stillzeit.

Weitere Informationen unter www.multi-gyn.nl oder www.multi-gyn.be

Hintergrundinformation

Viele Frauen kennen diese Intimbeschwerden: Reizungen, trockene Haut und Jucken im Intimbereich. Unannehmlichkeiten im Intimbereich können verschiedene Ursachen haben, z. B. Rasieren/Wachsen, enge Kleidung, Schweiß oder die Verwendung von Seife. Oft sind diese Beschwerden nicht ernst genug, um einen Arzt aufzusuchen. Wir erwarten, dass die Probleme von alleine verschwinden, und das tun sie oft auch. Aber manchmal kann es eine Weile dauern und in der Zwischenzeit ziemlich lästig werden. Multi-Gyn CalmingCream ist eine wirksame Lösung auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe für diese Art von Unannehmlichkeiten.

BioClin BV

Blaak 555, 3011 GB Rotterdam,
Nederland / Pays-Bas / Niederlande

APPROVED by margie.donkersloot on 09-Jan-2023 12:42.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
diane.delamar	diane delamar	Approved	05-Jan-2023 15:12