

**Multi-Gyn
FloraPlus
NL-BE**

karo

Reason for change: Vegan friendly removal
and age update

Proof version
1

Correction date: 10-02-2026

Artworker: MiFo

Print version
X


COM code: COM-4689-02
Artwork No: 2003843_2
Previous Artwork No: 2003843_1
SKU No: 1000757
CMO: Cosmade Belgium Bvba
CMO code: -
EAN No: -
Pharma No: -
Component Type: Leaflet
Language: Dutch, French, German

Dimensions (WxH): 150 x 230 mm
Material: Paper
Machine Drawing ID: -
Font: Noi Grotesk
Minimum Point Size: 5,25 pt
Print Process: -

Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.



Technical (Non Printing).

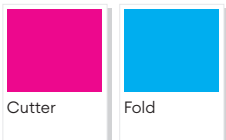

OVERPRINT PREVIEW

NO

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.

Multi-Gyn® FloraPlus



NL

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK VAN MULTI-GYN FLORAPLUS EN BEWAAR DEZE GOED.

Multi-Gyn FloraPlus verlicht symptomen van vaginale schimmelinfecties

- Behandelt symptomen van vaginale schimmel
- Snelle verlichting vanaf het te gebruik*
- Verlicht branderig gevoel, jeuk en irritatie
- Vermindert brokkelige witte afscheiding
- Bevat probiotica en melkzuur
- Optimaliseert de pH voor een gezonde vagina
- Op basis van natuurlijke ingrediënten

Indicatie

Multi-Gyn FloraPlus behandelt effectief symptomen en ongemakken van vaginale schimmel, zoals branderig gevoel, jeuk, irritatie en dikke, brokkelige witte afscheiding bij volwassen vrouwen. Verlicht jeuk binnen 10 minuten vanaf het te gebruik. Klinisch bewezen. Multi-Gyn FloraPlus is samengesteld met natuurlijk 2QR-complex, melkzuur en probiotica. De gel heeft een optimale pH voor een gezonde vaginale flora.

* Verlichting van jeuk binnen 10 minuten vanaf het eerste gebruik. Klinisch onderzoek onder 40 consumenten bevestigt dat 100% van de gebruikers de verpakking praktisch vond en dat 96% de toepassing van het product als gemakkelijk beoordeelde. 96% van de gebruikers zou het product willen blijven gebruiken en 93% van de gebruikers zou het product aanbevelen.

Inhoud

5 wegwerptubes met 5ml gel per stuk + gebruiksaanwijzing

Gebruik

Voor de verlichting van symptomen van een vaginale schimmelinfectie, gebruik 1 wegwerptube voor het slapengaan gedurende 5 opeenvolgende dagen.

Gebruik Multi-Gyn FloraPlus niet langer dan 30 opeenvolgende dagen. Hierdoor kan de vaginale flora zichzelf reguleren zonder ondersteuning.

Waarschuwing

Als klachten aanhouden of terugkeren, neem contact op met uw arts. Multi-Gyn FloraPlus is op basis van natuurlijke ingrediënten

Multi-Gyn FloraPlus is samengesteld met natuurlijk 2QR-complex en probiotica. Het bevat geen hormonen of parfum.

Ingrediënten

2QR-complex** (60%), Sodium Benzoate, Citric acid, Potassium Sorbate, Aqua, Lactic Acid, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Xanthan Gum, Fructo-oligosaccharides (FOS), Lactitol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Caprylyl Glycol. **Gezuiverd uit Aloe Barbadensis bladextract

Allergieën

Allergieën voor bestanddelen van Multi-Gyn FloraPlus zijn zeer zeldzaam. Gebruik Multi-Gyn FloraPlus niet als u allergisch bent voor één of meerdere ingrediënten.

N.B. Ervaart u een brandend of tintelend gevoel na gebruik? Geen zorgen, dit is normaal en trekt snel weg.

Bijwerkingen

Multi-Gyn FloraPlus heeft een optimale zuurgraad (lage pH) voor de vagina en kan de activiteit van sperma verminderen, omdat deze alkalisch is (hoge pH). Gebruik daarom geen Multi-Gyn FloraPlus tijdens de ovulatieperiode als u zwanger wilt worden.

Dit product is geen behandeling voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's).

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van Multi-Gyn FloraPlus tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding. Bespreek de opties met uw huisarts.

Gebruik met condooms en pessaria

Het effect van Multi-Gyn FloraPlus op pessaria en condooms is onbekend.

Gebruik met tampons en vaginale spoeling


Het wordt afgeraden om Multi-Gyn FloraPlus tegelijk met tampons en vaginale spoelingen te gebruiken. Deze kunnen (gedeeltelijk) de Multi-Gyn FloraPlus uit de vagina verwijderen en kunnen daardoor het effect van het product verminderen.

Bewaren

Bewaar Multi-Gyn FloraPlus tussen 10°C en 25°C (kamertemperatuur). Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

Gebruik Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus is een prebiotische vaginale gel en hoort in de vagina aangebracht te worden. Iedere wegwerptube is een enkele dosis. De afbeeldingen hieronder geven het gebruik van deze wegwerptubes weer. Gooi de tube weg na gebruik om hygiënische redenen.

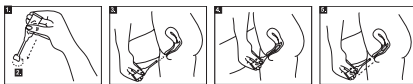

1. Schud de inhoud van de tube naar het dunne uiteinde van de tube.
2. Breek de punt van het tube af door deze te draaien.
3. Breng het dunne uiteinde (de applicator) van de tube voorzichtig in de vagina.
4. Knijp voorzichtig in de tube om de gel in de vagina aan te brengen.
5. Blijf knijpen terwijl u het dunne uiteinde van de tube uit de vagina haalt.

De tube is ontworpen om de aanbevolen hoeveelheid gel toe te dienen. Wanneer gebruikt zoals aangegeven, zal een kleine hoeveelheid gel in de tube overblijven.

In geval van een ernstig incident, neem contact op met de fabrikant en de nationaal bevoegde autoriteit.

Afval: Doosje en gebruiksaanwijzing kunnen bij oud papier. Wegwerptubes kunnen bij restafval. Raadpleeg ook uw lokale regelgeving over afvalscheiding voor meer informatie.

FR

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INFORMATION AVANT D'UTILISER MULTI-GYN FLORAPLUS ET CONSERVER-LA.

Multi-Gyn FloraPlus soulage les symptômes des mycoses vaginales

- Traite les symptômes des mycoses vaginales
- Soulagement rapide dès la première utilisation*
- Soulage les brûlures, les démangeaisons et les irritations
- Réduit les pertes blanches grumeleuses
- Contient des prébiotiques et de l'acide lactique
- Optimise le pH pour un vagin en bonne santé
- A base d'ingrédients naturels

Indication

Multi-Gyn FloraPlus traite efficacement les symptômes et les désagréments des mycoses vaginales, tels que les brûlures, les démangeaisons, les irritations et les pertes blanches épaisses et grumeleuses chez les femmes adultes. Soulage les démangeaisons en 10 minutes dès la première utilisation. Cliniquement prouvé. Multi-Gyn FloraPlus est formulé avec le complexe naturel 2QR, de l'acide lactique et des prébiotiques. Le gel a un pH optimal pour une flore vaginale saine.

* Soulagement des démangeaisons en 10 minutes dès la première utilisation. Une étude clinique menée auprès de 40 consommateurs a confirmé que 100% des utilisateurs ont trouvé l'emballage pratique et que 98 % d'entre eux ont jugé l'application du produit facile. 95 % des utilisateurs souhaitent continuer à utiliser le produit et 93 % le recommandent.

Contenu de l'emballage :

5 tubes à usage unique contenant 5 ml de gel

Utilisation:

Pour soulager rapidement les symptômes d'une mycose vaginale, utilisez 1 tube à usage unique avant d'aller dormir, pendant 5 jours consécutifs.

N'utilisez pas Multi-Gyn FloraPlus au-delà de 30 jours consécutifs. La flore vaginale peut ainsi se réguler spontanément sans soutien.

Avertissement

En cas de persistance ou de récurrence des symptômes, veuillez contacter votre médecin.

Multi-Gyn FloraPlus est à base d'ingrédients naturels. Multi-Gyn FloraPlus ne contient ni hormones, ni parfums.

Ingredients

2QR-complex** (60%), Sodium Benzoate, Citric acid, Potassium Sorbate, Aqua, Lactic Acid, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Xanthan Gum, Fructo-oligosaccharides (FOS), Lactitol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Caprylyl Glycol. ** A base d'extraits purifiés de feuilles d'aloë barbadensis.

Informations concernant les allergies

Les allergies aux composants de Multi-Gyn FloraPlus sont très rares. N'utilisez pas Multi-Gyn HydraCare si vous êtes allergique à un ou plusieurs des ingrédients.

N.B. Vous ressentez une brûlure ou des fourmillements après l'utilisation ? Ne vous en faites pas, cette sensation est normale et disparaît rapidement.

Effets secondaires

Multi-Gyn FloraPlus possède un degré d'acidité optimal (pH bas) pour le vagin et peut réduire l'activité du sperme étant donné que ce dernier est alcalin (pH élevé). Par conséquent, n'utilisez pas Multi-Gyn FloraPlus durant la période d'ovulation si vous souhaitez une grossesse.

Interactions avec d'autres médicaments

Il n'existe pas d'interactions connues avec des médicaments.

Grossesse et allaitement

Il n'existe pas de contre-indications connues à l'utilisation de Multi-Gyn FloraPlus durant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez discuter des possibilités avec votre médecin traitant.

Utilisation avec des préservatifs et des stériles

L'effet de Multi-Gyn FloraPlus sur les stériles et les préservatifs n'est pas connu.

Utilisation avec des tampons et des douches vaginales

Il est déconseillé d'utiliser Multi-Gyn FloraPlus en même temps que des tampons et des lavages vaginaux. Ceux-ci peuvent éliminer (partiellement) Multi-Gyn FloraPlus du vagin et peuvent par conséquent réduire l'effet du produit.

Conservation

Conserver Multi-Gyn FloraPlus à une température comprise entre 10 °C et 25 °C (température ambiante). Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption.

DE

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MULTI-GYN ACTIGEL 2 INI DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF.

Multi-Gyn FloraPlus zur Behandlung von Scheidenpilzbeschwerden

- Behandelt wirksam die Symptome von Scheidenpilzbeschwerden
- Schnelle Linderung nach der ersten Anwendung*
- Lindert Brennen, Juckreiz und Reizungen
- Reduziert krümeligen weißen Ausfluss
- Enthält Präbiotika und Milchsäure
- Optimiert den pH-Wert für eine gesunde Vagina
- Basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen

Indikation

Multi-Gyn FloraPlus ist äußerst wirksam zur Behandlung von Scheidenpilz und den damit einhergehenden Beschwerden wie Juckreiz, Reizungen und weißem, krümeligem Ausfluss bei erwachsenen Frauen. Lindert den Juckreiz innerhalb von 10 Minuten nach der ersten Anwendung*. Klinisch geprüft. Multi-Gyn FloraPlus basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen, dem 2QR-Komplex in Kombination mit Präbiotika. Das Gel hat einen optimalen pH-Wert für eine gesunde Vaginalflora.

* Linderung von Juckreiz innerhalb von 10 Minuten nach der ersten Anwendung. Klinische Untersuchungen mit 40 Konsumentinnen bestätigten, dass 100 % der Anwenderinnen die Verpackung praktisch fanden und 98 % die Anwendung des Produkts als einfach bewerteten. 95 % der Anwenderinnen würden das Produkt weiterhin verwenden und 93 % der Anwenderinnen würden das Produkt weiterempfehlen.

Inhalt

5 Einzeldosen in Tuben mit je 5 ml Gel + Gebrauchsanweisung

Hinweise zur Anwendung

Zur Behandlung von Scheidenpilzproblemen verwenden Sie an 5 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Einzeldosis kurz vor dem Schlafengehen.

Multi-Gyn FloraPlus nicht länger als an 30 aufeinanderfolgenden Tagen verwenden. So kann sich die Vaginalflora ohne Unterstützung selbst regulieren.

Warnung

Wenn die Symptome anhalten oder wiederkehren, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Multi-Gyn FloraPlus ist basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen. Multi-Gyn FloraPlus ist frei von Hormonen und Parfüm.

Inhaltsstoffe

2QR-complex** (60%), Sodium Benzoate, Citric acid, Potassium Sorbate, Aqua, Lactic Acid, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Xanthan Gum, Fructo-oligosaccharides (FOS), Lactitol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Caprylyl Glycol. ** Extrahiert aus Aloe barbadensis

Informationen zu Allergien

Allergische Reaktionen auf die Inhaltsstoffe von Multi-Gyn FloraPlus sind sehr selten. Zur Überprüfung empfehlen wir Ihnen, eine geringe Menge auf die Innenseite Ihres Unterarms aufzutragen. Bildet sich eine juckende, gerötete Stelle, raten wir Ihnen von der Anwendung von Multi-Gyn FloraPlus ab.

Nebenwirkungen

Da Multi-Gyn FloraPlus einen für die Vagina optimalen Säuregrad hat (niedriger pH-Wert) und Sperma alkalisch ist (hoher pH-Wert), kann die Anwendung von Multi-Gyn FloraPlus die Spermaaktivität verringern. Daher sollte Multi-Gyn FloraPlus nicht in der

Utilisation de Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus est un gel vaginal prébiotique qui doit être appliqué dans le vagin. Chaque tube jetable représente une dose unique. Les figures ci-dessous illustrent comment utiliser ces tubes à usage unique. Pour des raisons d'hygiène, jetez le tube après son utilisation.



1. Agitez le contenu du tube vers l'embout étroit de celui-ci.
2. Brisez et enlevez la pointe du tube en la tournant.
3. Introduisez délicatement l'embout étroit (l'appliqueur) du tube dans le vagin.
4. Pressez délicatement le tube pour appliquer le gel dans le vagin.
5. Continuez de presser le tube tout en ressortant son embout étroit hors du vagin.

Le tube est conçu pour délivrer la quantité de gel recommandée. En cas d'utilisation selon les instructions, une petite quantité de gel persistera dans le tube.

En cas d'incident grave, veuillez prendre contact avec le fabricant et l'autorité nationale compétente. Mentionnez votre incident, comment vous avez utilisé le produit, vos coordonnées, ainsi que les codes articles.

Élimination : La boîte et la notice peuvent être jetées avec le papier à recycler. Les tubes à usage unique peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Consultez également votre réglementation locale relative au tri des déchets pour de plus amples informations.

empfangnisbereiten Zyklusphase verwendet werden, wenn der Wunsch nach einer Schwangerschaft besteht.

Bitte beachten! Wenn Sie nach der Anwendung ein Brennen und/ oder Prickeln verspüren, machen Sie sich keine Sorgen. Dies ist normal und wird rasch vergehen.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es sind keine Gegenanzeigen für die Verwendung von Multi-Gyn FloraPlus während der Schwangerschaft und Stillzeit bekannt. Beraten Sie sich vor der Anwendung mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt.

Verträglichkeit mit Kondomen und Pessaren

Multi-Gyn FloraPlus sollte nicht gleichzeitig mit Kondomen verwendet werden. Der Einfluss auf Pessare ist nicht bekannt.

Verträglichkeit mit Tampons und Vaginalspülungen

Es wird empfohlen, Multi-Gyn FloraPlus nicht gleichzeitig mit Tampons und Vaginalspülungen zu verwenden. Diese könnten das Multi-Gyn FloraPlus teilweise oder ganz aus der Vagina entfernen und somit die gewünschte Wirkung vermindern.

Lagerung

Multi-Gyn FloraPlus sollte zwischen 10°C und 25°C (Zimmertemperatur) gelagert werden. Multi-Gyn FloraPlus ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Verwenden Sie Multi-Gyn FloraPlus nicht nach Ablauf des Verfalldatums.

Anwendung von Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn FloraPlus ist ein prebiotisches Vaginalgel, das direkt in der Vagina angewandt wird. Jede Tube entspricht einer Einzeldosis. Die Zeichnungen unten zeigen, wie die Tube mil der Einzeldosis verwendet wird. Werfen Sie die Tube aus hygienischen Gründen nach Gebrauch weg.



1. Schütteln Sie den Tubeninhalt zur Tubenspitze.
2. Brechen Sie die Tubenspitze durch Drehung ab.
3. Führen Sie vorsichtig die Tubenspitze in die Vagina ein.
4. Drücken Sie leicht auf die Tube, um das Gel in die Vagina einzubringen.
5. Entfernen Sie die Tube vorsichtig zusammen, um das Gel in die Vagina zu geben.

Beachten Sie: Die Tube ist so entworfen, dass sie die empfohlene Menge Gel abgibt. Bei vorschriftsmäßiger Anwendung bleibt eine kleine Menge Gel in der Tube zurück.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorkommnisses informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige nationale Behörde. Bitte geben Sie das Vorkommnis an, wie Sie das Produkt verwendet haben, sowie Angaben zu Ihrer Adresse und den Artikelnummern.

Entsorgung: Die Verpackung und Gebrauchsanweisung können ins Altpapier. Einwegtuben können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen finden Sie auch in den örtlichen Vorschriften zur Abfalltrennung.

APPROVED by michel.fonville on 13-Feb-2026 14:24.

Username	Full Name	Status	Date/Time (UTC)
charlotte.dhont	charlotte dhont	Approved	11-Feb-2026 11:52
jasmine.vinnfall	Jasmine Vinnfall	Approved	11-Feb-2026 21:44
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	12-Feb-2026 14:07
phil.hinckley	Phil Hinckley	Approved	12-Feb-2026 14:08