

**Multi-Gyn**  
**ActiGel 2IN1**  
**template artwork**

**karo**

Reason for change: AW Change to MDR  
Correction round: v3 Date: 21-02-2024  
Status: **IN PROGRESS**


KARO code: 2003610\_1  
Previous code: 2002535\_2  
CMO code: 77249802  
Component type: Leaflet  
Language: English  
Pharma code: 399

Dimensions (HxW): 230 x 150 mm  
Machine drawing ID: -  
Material: ?

Print colours:



Onlay:

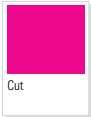

**ATTENTION:** If this supporting colour swatch is present it means **the artwork is still in progress** and therefore its content and technical specs are not ready for reproduction.



# Multi-Gyn® ActiGel 2IN1



**NL** LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK VAN MULTI-GYN ACTIGEL 2IN1 EN BEWAAR DEZE GOED.

Multi-Gyn ActiGel 2in1 heeft een dubbele werking: het behandelt bacteriële vaginose (BV) en herstelt de vaginale pH en flora.

- Stopt onaangename geur, abnormal afgescheidenheid en jeuk
- Herstelt de vaginale pH en flora
- Geeft direct verzachtende en kalmerende verlichting
- Natuurlijk product

## Indicatie

Multi-Gyn ActiGel 2in1 heeft een dubbele werking waarvan klinisch is bewezen dat het bacteriële vaginose (BV) behandelt en de pH-waarde herstelt voor een gezonde vaginale flora. Het verlicht de symptomen vanaf het gebruik.

Dit product is geen behandeling voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's).

## Inhoud verpakking

50 ml Multi-Gyn ActiGel 2in1 Tube + Applicator + Gebruiksaanwijzing

## Gebruiksaanwijzing

- Voor de behandeling van bacteriële vaginose (BV) met onaangename (vis)geur en afscheiding Multi-Gyn ActiGel 2in1 minimaal 2x per dag vaginaal inbrengen, gedurende minimaal 7 opeenvolgende dagen. We adviseren een applicatie 's morgens en 's avonds voor het slapen.
- Voor directe verlichting van vaginale ongemakken zoals jeuk en irritatie Multi-Gyn ActiGel 2in1 minimaal 1x per dag aanbrengen of zo vaak als verlichting gewenst is.

Multi-Gyn ActiGel 2in1 niet langer dan 30 opeenvolgende dagen gebruiken.

## Waarschuwing

Houden de ongemakken aan, neem dan contact op met uw huisarts.

## Multi-Gyn ActiGel 2in1 is op basis van natuurlijke ingrediënten.

Multi-Gyn ActiGel 2in1 is een natuurlijk product op basis van 2QR-complex\*. Het beschermt het weefsel op een natuurlijke manier tegen schadelijke bacteriën. Dat betekent: geen geurstoffen, hormonen of ingrediënten van dierlijke oorsprong.

## Ingrediënten

2QR-complex\*\* (83%), Xanthan Gum, Aqua, Glycerin, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate.  
\*Gezuiverd uit Aloe Barbadensis bladextract

\*Verlichting van irritatie en jeuk

Dit product heeft een gemiddelde pH van 4,0

## Allergieën

Allergieën voor bestanddelen van Multi-Gyn ActiGel 2in1 zijn zeer zeldzaam. Gebruik Multi-Gyn ActiGel 2in1 niet als u allergisch bent voor één of meer van de ingrediënten.

## Bijwerkingen

Multi-Gyn ActiGel 2in1 heeft een optimale zuurgraad (lage pH) voor de vagina en kan de activiteit van sperma verminderen, omdat deze alkalisch is (hoge pH). Gebruik daarom geen Multi-Gyn ActiGel 2in1 tijdens de ovulatieperiode als u zwanger wilt worden.

N.B. Ervaart u een brandend of tintelend gevoel na gebruik? Geen zorgen, dit is normaal en trekt snel weg.

## Gebruik in combinatie met geneesmiddelen

Er is geen interactie met geneesmiddelen bekend.

## Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van Multi-Gyn ActiGel 2in1 tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding. Bespreek de opties met uw huisarts.

## Gebruik met condooms en pessaria

Multi-Gyn ActiGel 2in1 hoort niet tegelijk met condooms gebruikt te worden. Het effect op een pessarium is onbekend.

## Gebruik met tampons en vaginale spoeling

Het wordt afgeraden om Multi-Gyn ActiGel 2in1 tegelijk met tampons en vaginale spoelingen te gebruiken. Deze kunnen (gedeeltelijk) de Multi-Gyn 2in1 uit de vagina verwijderen en kunnen daardoor het effect van het product verminderen.

## Bewaren

Bewaar Multi-Gyn ActiGel 2in1 tussen 10°C en 25°C (kamertemperatuur). Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.

## Inwendige en uitwendige toepassing Multi-Gyn ActiGel 2in1

### • Uitwendige toepassing


Voor ongemakken aan de uitwendige schaamstreek (vulva), kunt u Multi-Gyn ActiGel 2in1 met uw vinger aanbrengen. Was voor gebruik uw handen




1. Draai de dop van de tube. Prik voor het eerste gebruik met de achterzijde van de dop een gaatje in de verzegelde opening van de tube.
2. Neem de tube in één hand en houd de wijsvinger van uw andere hand bij de opening van de tube, zoals het plaatje laat zien. Krijp voorzichtig in de tube. Blijf knijpen tot u een ruime hoeveelheid op uw wijsvinger heeft, zoals op afbeelding 3.
3. De benodigde hoeveelheid gel hoort uw vingertop te bedekken (ca. 2ml).
4. Breng de gel aan op de uitwendige schaamstreek.

### • Inwendige toepassing

De speciaal bijgeleverde applicator kan helpen als u de gel vaginaal in wilt brengen. De applicator kan op de tube geschroefd worden. Verwijder na gebruik de applicator van de tube en reinig met warm water. De applicator kan ook bewaard worden of kan met het dopje terug op de tube geschaafd worden. Het is ook mogelijk om de gel inwendig aan te brengen met uw vinger. Was uw handen en breng ten minste een hoeveelheid gel gelijk aan de vingertop aan de vingertop aan in de vagina.

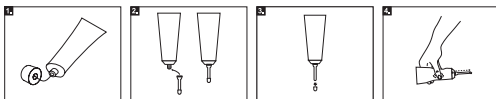

1. Draai de dop van de tube. Prik voor het eerste gebruik met de achterzijde van de dop een gaatje in de verzegelde opening van de tube.
2. Draai de bijgeleverde applicator op de tube.
3. Haal het dopje van de applicator.
4. Neem de tube in één hand en knijp voorzichtig tot de gel uit de applicator komt. Nu is de applicator gevuld en klaar voor gebruik. Oefen hoeveel gel er uit komt als u de tube licht inknijpt. U heeft ten minste een hoeveelheid ter grootte van een vingertop nodig (ca. 2 ml).

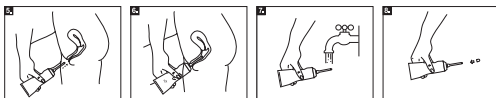

5. Breng de applicator die op de tube zit aan in de vagina, zoals op het plaatje. De applicator is korter dan dat de vagina diep is en zal de baarmoedermond niet beschadigen.
5. Knijp zachtjes in de tube. U heeft minimaal een hoeveelheid ter grootte van een vingertop nodig. Het is niet erg als u meer inbrengt.
5. Kunt na gebruik de applicator op de tube laten zitten en afspoelen met warm water.
5. Plaats het dopje terug op de applicator.

In geval van een ernstig incident, neem contact op met de fabrikant en de nationaal bevoegde autoriteit. Geef uw incident, hoe u het product heeft gebruikt, woongegevens en artikelcodes door.

**Atentie!** Doosjes en gebruiksaanwijzing kunnen bij oud papier. Tube en applicator kunnen bij restafval.

Readpleeg ook uw lokale regelgeving over afvalschieding voor meer informatie.

Medisch hulpmiddel.

**FR** VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INFORMATION AVANT D'UTILISER MULTI-GYN ACTIGEL 2IN1 ET CONSERVEZ-LA.

## À propos de Multi-Gyn ActiGel 2in1

Multi-Gyn ActiGel 2in1 est la solution pour traiter une vaginose bactérienne et rétablir le pH optimal d'un vagin en bonne santé - doublement efficace et cliniquement testée.

- Arrête les odeurs désagréables, les sécrétions anormales et les démangeaisons
- Rétablit l'équilibre du pH vaginal et de la flore vaginale
- Induit un soulagement rapide des symptômes dès la première utilisation\*
- A base d'ingrédients naturels

## Dans quel but Multi-Gyn ActiGel 2in1 est-il utilisé?

Multi-Gyn ActiGel 2in1 est une solution doublement efficace, testée cliniquement pour le traitement d'une vaginose bactérienne : il arrête les symptômes tels que sécrétions anormales, odeurs désagréables de poisson, démangeaisons, irritations, sensibilité, rougeurs et douleurs et rétablit l'équilibre du pH vaginal et de la flore vaginale. Ne convient pas pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles.

## Contenu de l'emballage

Cet emballage d'ActiGel 2in1 contient un tube de gel de 50 ml, un applicateur et un mode d'emploi.

## Comment est utilisé Multi-Gyn ActiGel 2in1?

- Pour le traitement d'une vaginose bactérienne (VB), appliquez Multi-Gyn ActiGel 2in1 dans le vagin, au moins deux fois par jour pendant sept jours consécutifs au moins. Nous recommandons d'appliquer le gel le matin, ainsi que le soir peu avant le coucher.
- En cas de problèmes dans la région vaginale tels que démangeaisons et irritations, appliquez Multi-Gyn ActiGel 2in1 au moins une fois par jour, ou chaque fois que vous ressentez le besoin d'un soulagement rapide.

Multi-Gyn ActiGel 2in1 ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours consécutifs. Si vos symptômes persistent ou réapparaissent, veuillez contacter votre médecin.

## Ingédients

Complexe 2QR\* (83%), xanthane, eau, glycérine, caprylyl glycol, acide lactique, hydroxyde de sodium, benzoate de sodium, acide citrique, sorbate de potassium.

\*A base d'extraits purifiés de feuilles d'aloë barbadensis.

Multi-Gyn ActiGel 2in1 a un pH moyen de 4,0

\*Soulagement des irritations et des démangeaisons

## Informations concernant les allergies

Des réactions allergiques aux ingrédients de Multi-Gyn ActiGel 2in1 surviennent très rarement. Pour le vérifier, nous vous recommandons d'appliquer une petite quantité sur la face interne de votre avant-bras. Si le site d'application démange et rougit, nous vous déconseillons d'utiliser Multi-Gyn ActiGel 2in1.

## Effets secondaires

Comme Multi-Gyn ActiGel 2in1 présente une acidité optimale pour le vagin (pH bas) et que le sperme est alcalin (pH élevé), l'utilisation de Multi-Gyn ActiGel 2in1 peut réduire l'activité des spermatozoïdes. En conséquence, en cas de désir d'enfant, Multi-Gyn ActiGel 2in1 ne doit pas être utilisé durant la phase féconde du cycle.

**Veillez noter!** Si vous éprouvez une sensation de brûlure et/ou de picotement après l'application, ne vous inquiétez pas. Cette sensation est normale et disparaîtra rapidement.

## Interactions avec d'autres médicaments

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue.

## Grossesse et allaitement

Aucune contre-indication à l'utilisation de Multi-Gyn ActiGel 2in1 pendant la grossesse et l'allaitement n'est connue. Demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

## Tolérance avec les préservatifs et les pessaires

Multi-Gyn ActiGel 2in1 ne doit pas être utilisé simultanément à des préservatifs. Son effet sur les pessaires n'est pas connu.

Tolérance avec les tampons et les douches vaginales

Il est recommandé de ne pas utiliser Multi-Gyn ActiGel 2in1 en même temps que des tampons et des douches vaginales, qui pourraient éliminer Multi-Gyn ActiGel 2in1 en tout ou partie du vagin et donc réduire l'effet souhaité.


Conservation

Multi-Gyn ActiGel 2in1 doit être conservé à une température comprise entre 10°C et 25°C (température ambiante). Tenir Multi-Gyn ActiGel 2in1 hors de portée des enfants. N'utilisez pas Multi-Gyn ActiGel 2in1 après la date de péremption.

Application de Multi-Gyn ActiGel 2in1 dans la zone intime externe et interne

• Application dans la zone intime externe


En cas de problèmes dans la zone intime externe (vulve), vous pouvez appliquer Multi-Gyn ActiGel 2in1 avec vos doigts. Veuillez vous laver les mains avant chaque utilisation.

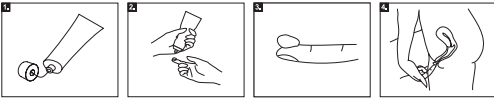


1. Retirez le capuchon du tube. Le dessus du capuchon permet de percer le scellement du tube avant sa première utilisation.
2. Appliquez le tube dans une main et tenez l'index de l'autre main à proximité du tube. Appliquez légèrement sur le tube. Appuyez jusqu'à ce que vous ayez une quantité suffisante de gel sur le doigt.
3. Déposez une quantité au moins égale à la grosseur du bout de votre doigt (environ 2 ml).
4. Appliquez le gel dans la zone intime externe.

• Application dans la zone intime interne

L'applicateur spécial que vous trouvez dans l'emballage permet d'appliquer le gel dans le vagin. Il peut être vissé sur le tube. Après l'application, retirez l'applicateur du tube et lavez-le à l'eau chaude. Vous pouvez conserver l'applicateur séparément ou le revisser avec le capuchon sur le tube. Si vous préférez appliquer le gel avec votre doigt, vous pouvez l'introduire avec le doigt dans le vagin. Lavez-vous les mains, déposez sur votre index une quantité de gel au moins égale à la grosseur du bout de votre doigt et introduisez votre index dans votre vagin.

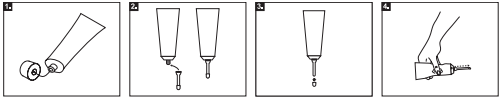

1. Retirez le capuchon du tube. Le dessus du capuchon permet de percer le scellement du tube avant sa première utilisation.
2. Vissez l'applicateur qui se trouve dans l'emballage sur le tube.
3. Retirez le petit capuchon de l'applicateur.
4. Prenez le tube dans une main et appuyez légèrement jusqu'à ce que le gel sorte par l'avant de l'applicateur. Lorsque le gel sort par l'avant, vous savez que l'applicateur est rempli de gel et qu'il est prêt à l'emploi. Essayez de voir la quantité de gel qui sort lorsque vous appuyez légèrement. Vous avez besoin d'une quantité de gel au moins égale à la grosseur du bout de votre doigt (env. 2 ml).

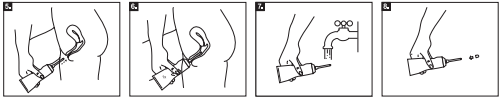

5. Introduisez l'applicateur vissé sur le tube dans le vagin, comme indiqué sur l'illustration. L'applicateur est plus court que le vagin, afin qu'il ne puisse pas blesser le col de l'utérus.
6. Appuyez légèrement sur le tube. Vous avez besoin d'une quantité de gel au moins égale à la grosseur du bout de votre doigt. Il n'existe cependant aucune limitation de quantité et aucun risque si vous utilisez davantage de produit.
7. Après son utilisation, vous pouvez laisser l'applicateur sur le tube et le nettoyer à l'eau chaude.
8. Refermez l'applicateur avec le petit capuchon.

En cas d'incident grave, veuillez informer le fabricant et votre médecin.

**Élimination :** Le produit peut être éliminé avec les ordures ménagères.

Dispositif médical.

**DE** BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MULTI-GYN ACTIGEL 2IN1 DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM NACHSCHLAGEN AUF.

Über Multi-Gyn ActiGel 2in1

Multi-Gyn ActiGel 2in1 ist die Lösung zur Behandlung einer bakteriellen Vaginose und Wiederherstellung des optimalen pH-Werts einer gesunden Vagina - zweifach wirksam und klinisch geprüft.

- Stopp unangenehmen Geruch, abnormalen Ausfluss und Juckreiz
- Bringt den vaginalen pH-Wert und die Vaginalflora zurück in Balance
- Es erleichtert die Symptome schon nach der ersten Anwendung\*
- Auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe

Wofür wird Multi-Gyn ActiGel 2in1 angewendet?

Multi-Gyn ActiGel 2in1 ist eine zweifach wirksame, klinisch getestete Lösung zur Behandlung einer bakterieller Vaginose: Es stoppt Beschwerden wie abnormalen Ausfluss, unangenehm fischigen Geruch, Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, Rötungen und Schmerzen und bringt den vaginalen pH-Wert und die Vaginalflora zurück in Balance. Nicht geeignet zur Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten.

Inhalt der Packung

Diese ActiGel 2in1 Packung enthält eine Tube mit 50 ml Gel, einen Applikator und eine Gebrauchsanweisung.

Wie wird Multi-Gyn ActiGel 2in1 angewendet?

- Zur Behandlung einer bakteriellen Vaginose (BV) verwenden Sie Multi-Gyn ActiGel 2in1 in der Vagina mindestens zweimal täglich für die Dauer von mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Wir empfehlen die Anwendung morgens und abends kurz vor dem Schlafengehen.
- Für Beschwerden im Vaginalbereich wie Juckreiz und Reizungen tragen Sie Multi-Gyn ActiGel 2in1 mindestens einmal täglich auf oder wann immer Sie schnelle Erleichterung benötigen.

Multi-Gyn ActiGel 2in1 sollte nicht länger als 30 Tage in Folge angewendet werden. Falls Ihre Beschwerden weiter bestehen oder wiederkehren, kontaktieren Sie bitte Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt.

Inhaltsstoffe

2GR-Komplex™ (83%), Xanthan, Wasser, Glycerin, Caprylylglykol, Milchsäure, Natriumhydroxid, Natriumbenzoat, Zitronensäure, Kaliumsorbat. \* Gewonnen aus Aloe Barbadensis Blattextrakt. Multi-Gyn ActiGel 2IN1 hat einen durchschnittlichen pH-Wert von 4,0.

\* Erleichterung von Reizungen und Juckreiz

Informationen zu Allergien

Allergische Reaktionen auf die Inhaltsstoffe von Multi-Gyn ActiGel 2in1 treten sehr selten auf. Zur Überprüfung empfehlen wir Ihnen, eine geringe Menge auf die Innenseite Ihres Unterarms aufzutragen. Bildet sich eine juckende, gerötete Stelle, raten wir Ihnen von der Anwendung von Multi-Gyn ActiGel 2in1 ab.

Nebenwirkungen

Da Multi-Gyn ActiGel 2IN1 einen für die Vagina optimalen Säuregrad hat (niedriger pH-Wert) und Sperma alkalisch ist (hoher pH-Wert), kann die Anwendung von Multi-Gyn ActiGel 2in1 die Spermativität verringern. Daher sollte Multi-Gyn ActiGel 2in1 nicht in der empfängnisreifen Zyklusphase verwendet werden, wenn der Wunsch nach einer Schwangerschaft besteht.

**Bitte beachten!** Wenn Sie nach der Anwendung ein Brennen und/ oder Prickeln verspüren, machen Sie sich keine Sorgen. Dies ist normal und wird nach vergehen.

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es sind keine Gegenanzeigen für die Verwendung von Multi-Gyn ActiGel 2in1 während der Schwangerschaft und Stillzeit bekannt. Beraten Sie sich vor der Anwendung mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt.

Verträglichkeit mit Kondomen und Pessaren

Multi-Gyn ActiGel 2in1 sollte nicht gleichzeitig mit Kondomen verwendet werden. Der Einfluss auf Pessare ist nicht bekannt.

Verträglichkeit mit Tampons und Vaginalspülungen

Es wird empfohlen, Multi-Gyn ActiGel 2in1 nicht gleichzeitig mit Tampons und Vaginalspülungen zu verwenden. Diese könnten das Multi-Gyn ActiGel 2in1 teilweise oder ganz aus der Vagina entfernen und somit die gewünschte Wirkung vermindern.


Lagerung

Multi-Gyn ActiGel 2in1 sollte zwischen 10°C und 25°C (Zimmertemperatur) gelagert werden. Multi-Gyn ActiGel 2in1 ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Verwenden Sie Multi-Gyn ActiGel 2in1 nicht nach Ablauf des Verfalldatums

Anwendung von Multi-Gyn ActiGel 2in1 im äußeren und inneren Intimbereich

• Anwendung im äußeren Intimbereich


Bei Beschwerden im äußeren Intimbereich (Vulva) können Sie Multi-Gyn ActiGel 2in1 mit Ihren Fingern auftragen. Vor jeder Anwendung bitte die Hände waschen

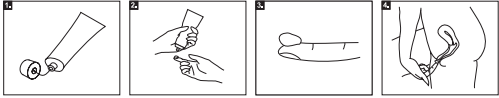


1. Nehmen Sie die Kappe der Tube ab. Mit der Oberseite der Kappe können Sie die Versiegelung der Tube vor der ersten Verwendung durchstechen.
2. Nehmen Sie die Tube in eine Hand und halten Sie den Zeigefinger der anderen Hand in die Nähe der Tube. Drücken Sie leicht auf die Tube. Drücken Sie so lange, bis Sie eine ausreichende Menge auf dem Finger haben.
3. Nehmen Sie mindestens eine Fingerspitze voll (ca. 2 ml).
4. Tragen Sie das Gel im äußeren Intimbereich auf.

• Anwendung im inneren Intimbereich

Für die Anwendung des Gels in der Vagina kann der spezielle Applikator verwendet werden, den Sie in der Packung finden. Dieser kann auf die Tube geschraubt werden. Nach der Anwendung nehmen Sie den Applikator von der Tube ab und waschen ihn mit warmem Wasser ab. Sie können den Applikator separat aufbewahren oder wieder mit der Kappe auf die Tube schrauben. Wenn Sie die Anwendung mit Ihrem Finger bevorzugen, können Sie das Gel mit dem Finger in die Vagina einführen. Waschen Sie Ihre Hände, geben Sie mindestens eine Fingerspitze voll auf Ihren Zeigefinger und führen Sie ihn in Ihre Vagina ein.

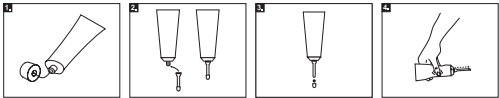

1. Nehmen Sie die Kappe der Tube ab. Mit der Oberseite der Kappe können Sie die Versiegelung der Tube vor der ersten Verwendung durchstechen.
2. Schrauben Sie den Applikator, der sich in der Packung befindet, auf die Tube.
3. Nehmen Sie die kleine Kappe des Applikators ab.
4. Nehmen Sie die Tube in eine Hand und drücken Sie leicht, bis das Gel vorne aus dem Applikator austritt. Wenn das Gel vorne austritt, wissen Sie, dass der Applikator mit Gel befüllt und einsatzbereit ist. Probieren Sie aus, wieviel Gel austritt, wenn Sie leicht drücken. Sie brauchen mindestens eine Fingerspitze voll Gel (ca. 2 ml).

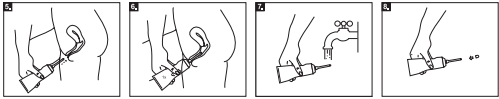

1. Führen Sie den auf die Tube geschraubten Applikator in die Scheide ein, wie in der Abbildung gezeigt ist. Der Applikator ist kürzer als die Vagina, so dass er die Zervix nicht verletzen kann.
2. Drücken Sie leicht auf die Tube. Sie brauchen mindestens eine Fingerspitze voll Gel. Es gibt jedoch keine Mengenbegrenzung und kein Risiko, wenn Sie mehr verwenden.
3. Nach der Verwendung können Sie den Applikator auf die Tube lassen und mit warmem Wasser reinigen.
4. Verschließen Sie den Applikator mit der kleinen Kappe.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorkommnisses informieren Sie bitte den Hersteller und Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt.

**Entsorgung:** Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Medizinisches Hilfsmittel.



**Fabrikant / Fabricant / Hersteller:**

BioClin BV, Blaak 565, 3011 GB Rotterdam, The Netherlands



0482

2003610\_1  
77249802

APPROVED by michel.fonville on 21-Feb-2024 14:10.

| Username      | Full Name     | Status   | Date/Time (UTC)   |
|---------------|---------------|----------|-------------------|
| phil.hinckley | Phil Hinckley | Approved | 21-Feb-2024 12:02 |
| phil.hinckley | Phil Hinckley | Approved | 21-Feb-2024 12:03 |
| phil.hinckley | Phil Hinckley | Approved | 21-Feb-2024 12:03 |
| phil.hinckley | Phil Hinckley | Approved | 21-Feb-2024 12:04 |