



Multi-Gyn LiquiGel



BG

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА MULTI-GYN LIQUIGEL И Я СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Multi-Gyn LiquiGel бързо облекчава вагиналната сухота, както и сърбежа и паренето

- Има успокояващ и дълготраен овлажняващ ефект
- Клинично доказана ефективност, без хормони
- На базата на натурални съставки
- За вътрешна и външна употреба

Приложение

Multi-Gyn LiquiGel е продукт за облекчаване на вагиналната сухота при жените. Вагиналната сухота може да бъде причинена от различни фактори, включително хормонални промени (като менопауза, раждане или кърмене), прием на лекарства и стрес. Multi-Gyn LiquiGel бързо облекчава раздразненията и дискомфорта, свързани с вагиналната сухота, като допълва естествената влага на вагината. Има дълготраен овлажняващ ефект, поддържа вагиналната флора и може да се използва по време на полов акт, за да подпомогне естествената вагинална влага.

Как действа Multi-Gyn LiquiGel

Multi-Gyn LiquiGel е гел без хормони, базиран на естествения 2QR-комплекс. Той лекува вагиналната сухота и раздразненията по нежен, но ефективен начин. Multi-Gyn LiquiGel образува адхезивен филм върху стените на влагалището, за да осигури дълготраен овлажняване и здрава вагинална флора. Редовното прилагане на Multi-Gyn LiquiGel намалява раздразненията, причинени от вагинална сухота.

Начин на употреба

При вагинална сухота нанесете нужното количество Multi-Gyn LiquiGel поне веднъж дневно или козато имате нужда от облекчение. При сухота на външната интимна зона (вулвата) можете да нанесете Multi-Gyn LiquiGel с пръст. Винаги измивайте ръцете си преди и след нанасяне на гела. За вътрешно приложение може да се използва специалният апликатор.

Съдържание на опаковката

50 ml Multi-Gyn LiquiGel тубичка + апликатор + инструкции за употреба

Предупреждение

Ако симптомите Ви продължават или се повтарят, обърнете се към Вашия лекар.

Multi-Gyn LiquiGel се основава на натурални съставки

Multi-Gyn LiquiGel се основава на натуралния 2QR-комплекс. Тази уникална формула не съдържа хормони, съставки от животински произход или парфюм.

Съставки

Aqua, 2QR-complex* 25%, Glycerin 25%, Betaine, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. *пречистен екстракт от листа на Aloe Barbadensis.

Информация за алергии

Алергични към съставките на Multi-Gyn LiquiGel са много редки. Не употребявайте Multi-Gyn LiquiGel, ако сте алергични към някоя от съставките.

Странични ефекти и противопоказания

Multi-Gyn LiquiGel е формула на натурална основа. Multi-Gyn LiquiGel не е контрацептив и не съдържа спермиди. Влиянието му върху активността на сперматозоидите не е изследвано. Затова препоръчваме да не използвате Multi-Gyn LiquiGel по време на овулационния си период, ако желаете да забременеете.

Моля, имайте предвид

Ако след нанасянето почувствате парене и/или изтръпване, не се притеснявайте. Това е нормално и преминава бързо.

Взаимодействие с лекарства

Няма известни взаимодействия с лекарства.

Бременност и кърмене

Няма известни противопоказания за употребата на Multi-Gyn LiquiGel по време на бременност и кърмене. Обсъдете възможностите с Вашия лекар.

Употреба с презервативи и песари

Multi-Gyn LiquiGel не трябва да се използва едновременно с презервативи. Ефектът върху контрацептивните песари е неизвестен.

Употреба с тампони и вагинални изплаквания

Не се препоръчва едновременно употреба на Multi-Gyn LiquiGel с тампони или вагинални промивки. Те могат да отстранят (част от) Multi-Gyn LiquiGel от влагалището и по този начин да намалят ефекта на продукта.

Съхранение


Съхранявайте Multi-Gyn LiquiGel при температура между 10°C и 25°C (стайна температура).

Съхранявайте Multi-Gyn LiquiGel на място, недостъпно за деца. Не използвайте Multi-Gyn LiquiGel след изтичане на срока на годност.

Как да използвате Multi-Gyn LiquiGel външно и вътрешно

Външно приложение


При сухота на външната интимна зона (вулвата) можете да нанесете Multi-Gyn LiquiGel с пръст. Измивайте си ръцете винаги преди и след нанасянето на гела.

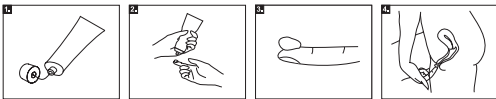


1. Отвийте капачката на тубичката. Преди първата употреба пробиете запечатването с обратната страна на капачката.
2. Хванете тубата в едната си ръка, а показалеца на другата дръжте близо до нея, както е показано на картинката. Стиснете тубата леко. Продължете да стискате, докато не изтискате достатъчно.
3. Количество върху показалеца си, както е показано на картинката (около 2 ml)
4. Нанесете гела върху външната интимна зона.

Вътрешно приложение

Специалният апликатор може да Ви помогне при нанасянето на гела във влагалището. Той е включен в опаковката и може да се затве върху тубичката. След употреба махнете апликатора от тубичката и го измийте с топла вода. Можете да съхранявате апликатора отделно или да го поставите обратно върху тубичката с капачката. Ако предпочитате, можете да нанесете гела вътрешно с пръст, вместо да използвате апликатора. Измийте ръцете си и нанесете количество поне колкото върха на пръста върху показалеца си, след което го нанесете във влагалището.

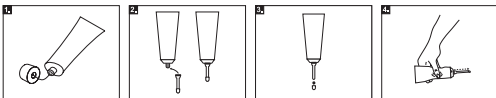

1. Отвийте капачката от тубичката. Преди първата употреба пробиете запечатването с обратната страна на капачката.
2. Поставете специалния апликатор, който се намира в кутията, като го затвете върху тубичката.
3. Свалете малката капачка от апликатора.
4. Вземете тубичката в едната ръка и я стиснете леко, докато гелът излезе от върха на апликатора. Когато гелът излезе, знаете, че апликаторът е пълен с гел и готов за употреба. Пробвайте с леко стискане, за да видите колко количество излиза от тубата; необходимо е количество поне колкото върха на пръста (около 2 ml).

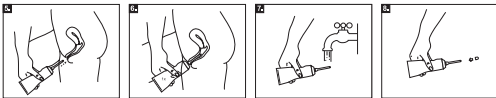

5. Въведете прикачения апликатор във влагалището, както е показано на картинката. За да улесните въвеждането, можете да нанесете малко количество гел върху външната интимна кожа. Апликаторът е по-малък от влагалището и няма да увреди шийката на матката (отбора на матката).
6. Натиснете леко тубичката. Необходимо е количество, равно на върха на пръста. Няма обаче ограничение или риск, ако нанесете повече.
7. След употреба можете да оставите апликатора върху тубичката и да го изплакнете с топла вода.
8. Поставете малката капачка обратно върху апликатора.

При възникване на сериозни нежелани реакции, моля, уведомете производителя и националния компетентен орган в страната, която пребивавате.

Изхвърляне: Този продукт може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. За повече информация вижте също местните нормативни изисквания за повече информация.

Multi-Gyn LiquiGel



RO

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST PROSPECT ÎNAINTE DE A FOLOSI MULTI-GYN LIQUIGEL. PĂSTRĂȚI PROSPECTUL ESTE POSIBIL SĂ FIE NECESAR SĂ-L RECITIȚI.

Multi-Gyn LiquiGel tratează și ameliorează rapid uscăciunea vaginală, calmând mâncărimile și senzația de arsură

- Are un efect calmant și hidratant de lungă durată
- Dovedit clinic și fără hormoni
- Bazat pe ingrediente naturale
- Pentru uz intern și extern

Indicații

Multi-Gyn LiquiGel este produsul ideal pentru ameliorarea uscăciunii vaginale la femeile adulte. Uscăciunea vaginală poate avea multe cauze, inclusiv schimbări hormonale (precum menopauza, nașterea sau alăptarea), medicamente și stres. Multi-Gyn LiquiGel ameliorează rapid iritațiile și disconfortul asociate cu uscăciunea vaginală prin suplimentarea umidității naturale a vaginului. Are un efect hidratant de lungă durată, susține flora vaginală și poate fi utilizat în timpul actului sexual pentru a sprijini hidratarea naturală a vaginului.

Cum acționează Multi-Gyn LiquiGel

Multi-Gyn LiquiGel este un gel natural, fără hormoni, bazat pe complexul brevetat 2QR. Tratează uscăciunea și iritația vaginală într-un mod delicat, dar eficient. Multi-Gyn LiquiGel formează un strat adeziv pe pereții vaginali pentru a asigura o hidratare de lungă durată și o floră vaginală sănătoasă. Aplicarea regulată a Multi-Gyn LiquiGel reduce iritațiile cauzate de uscăciunea vaginală.

Mod de utilizare

Pentru uscăciunea vaginală, aplicați o cantitate generoasă de Multi-Gyn LiquiGel cel puțin o dată pe zi sau ori de câte ori aveți nevoie de ameliorare. Pentru uscăciunea zonei intime externe (vulva), puteți aplica Multi-Gyn LiquiGel folosindu-vă degetul. Spălați-vă întotdeauna pe mâini înainte și după aplicarea gelului. Pentru aplicarea internă, se poate utiliza aplicatorul special.

Conținutul pachetului

50ml Multi-Gyn LiquiGel Tub + Aplicator + Instrucțiuni de utilizare

Atenționare

Dacă simptomele persistă sau reapar, trebuie să consultați medicul.

Multi-Gyn LiquiGel conține ingrediente naturale

Multi-Gyn LiquiGel conține complexul natural 2QR. Această formulă unică, nu conține hormoni, ingrediente de origine animală sau parfüm.

Ingrediente

Aqua, 2QR-complex* 25%, Glycerin 25%, Betaine, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

* Extract purificat din frunze de Aloe Barbadensis.

Informații despre alergii

Alergiile la ingredientele Multi-Gyn LiquiGel sunt foarte rare. Vă rugăm să nu utilizați Multi-Gyn LiquiGel dacă sunteți alergic la unul dintre ingrediente.

Efecte secundare și Contraindicații

Multi-Gyn LiquiGel are o formulă bazată pe ingrediente naturale. Multi-Gyn LiquiGel nu este un contraceptiv și nu conține spermicide. Totuși, influența asupra activității spermatozoidilor nu a fost cercetată. Prin urmare, recomandăm să nu utilizați Multi-Gyn LiquiGel în perioada ovulației dacă doriți să rămâneți însărcinată.

Rețineți

Dacă simțiți o senzație de arsură și/sau furnicături după aplicare, nu vă faceți griji. Acest lucru este normal și dispare rapid.

Interacțiuni cu medicamentele

Nu există interacțiuni cunoscute cu medicamentele.

Sarcina și alăptarea

Nu există contraindicații cunoscute privind utilizarea Multi-Gyn LiquiGel în timpul sarcinii și alăptării. Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Utilizarea cu prezervative și inele contraceptive

Multi-Gyn LiquiGel nu ar trebui utilizat în același timp cu prezervative. Efectul asupra inelului contraceptive nu este cunoscut.

Utilizarea cu tamponi și spălături vaginale

Nu este recomandată utilizarea Multi-Gyn LiquiGel concomitent cu tamponi și spălături vaginale. Acestea pot înălțura o parte din cantitatea de Multi-Gyn LiquiGel din vagin și ca urmare, pot reduce efectul produsului.

Depozitare

Păstrați Multi-Gyn LiquiGel între 10°C și 25°C (la temperatura camerei). A nu se depozita la îndemâna copiilor. Nu utilizați Multi-Gyn LiquiGel după data de expirare.

www.multi-gyn.com



0482






Cum să utilizați Multi-Gyn LiquiGel extern și intern

• Aplicare externă


Pentru uscăciunea zonei intime exterioare (vulvă), puteți aplica Multi-Gyn LiquiGel cu degetul. Întotdeauna spălați-vă pe mâini înainte și după aplicarea gelului.

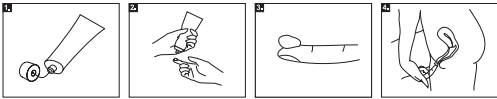


1. Deșurubați capacul tubului. Utilizați partea din spate a capacului pentru a desigila tubul înainte de prima utilizare.
2. Luați tubul într-o mână și țineți degetul arătător al celeilalte mâini în apropierea tubului, așa cum se arată.
3. Aveți nevoie de o cantitate, cel puțin, cât vârful unui deget. (aprox. 2 ml)
4. Aplicați gelul pe zona intimă externă.

• Aplicare internă

Aplicatorul special poate fi util pentru aplicarea gelului în interiorul vaginului. Acesta este inclus în cutie și poate fi înșurubat pe tub. După utilizare, îndepărtați aplicatorul de pe tub și spălați-l cu apă caldă. Puteți depozita aplicatorul separat sau pe tub cu capacul montat. Dacă preferați, puteți aplica gelul intern cu degetul în loc să utilizați aplicatorul. Spălați-vă pe mâini și aplicați cel puțin cantitatea cât vârful degetului arătător apoi introduceți-l în vagin.

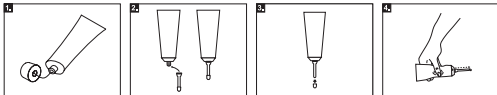

1. Deșurubați capacul tubului. Utilizați partea din spate a capacului pentru a strângere tubul sigilat înainte de prima utilizare.
2. Atașați aplicatorul special, care este în interiorul cutiei, prin înșurubarea acestuia pe tub.
3. Scoateți căpăcelul de pe aplicator.
4. Luați tubul într-o mână și stoarceți ușor până când gelul iese din aplicator. Când gelul iese, știți că aplicatorul este plin cu gel și gata de utilizare. Testați pentru a vedea cât de mult iese cu o stocare blândă; aveți nevoie de o cantitate cel puțin cât vârful unui deget (aproximativ 2 ml).

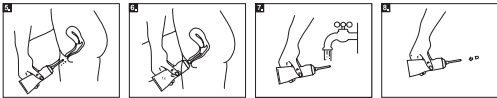

5. Introduceți aplicatorul atașat în vagin așa cum arată imaginea. Pentru a ușura introducerea acestuia, puteți aplica puțin gel pe zona exterioră a pielii intime. Aplicatorul este mai mic decât vaginul și nu va răni colul uterin (deschiderea uterului).
6. Îstrângeți ușor tubul. Aveți nevoie de cel puțin o cantitate egală cu vârful degetului. Cu toate acestea, nu există nici o limitare și nici un risc dacă aplicați mai mult.
7. După utilizare, puteți lăsa aplicatorul pe tub. Clătiți-l cu apă caldă.
8. Așezați căpăcelul înapoi pe aplicator.

rugăm să informați producătorul și autoritatea națională competentă din țara dumneavoastră de reședință.

Eliminare: Acest produs poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Consultați și reglementările locale pentru mai multe informații.

Multi-Gyn LiquiGel

Multi-Gyn[®]

SK

PRED POUŽITÍM ZDRAVOTNICKÉJ POMŮCKY MULTI-GYN LIQUIGEL SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE SI HO. MOŽNO BUDE POTREBNÉ, ABY STE SI HO ZNOVU PREČÍTALI.

Multi-Gyn LiquiGel účinne rieši a rýchlo zmierňuje vaginálnu suchosť a uľavuje od svrbenia a pálenia.

- Má upokojujúci a dlhotrvajúci hydratačný účinok.
- Je klinicky overený a neobsahuje hormóny.
- Je na báze prírodných zložiek.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie

Indikácie

Multi-Gyn LiquiGel je zdravotnícka pomôcka na zmiernenie vaginálnej suchosti u dospelých žien. Vaginálna suchosť môže mať mnoho príčin vrátane hormonálnych zmien (ako sú menopauza, pôrod alebo dojčenie), užívania liekov a stresu. Multi-Gyn LiquiGel rýchlo zmierňuje podráždenie a neprjemné pocity spojené s vaginálnou suchosťou tým, že doplní prirodzenú vlhkosť pošvy. Má dlhotrvajúci hydratačný účinok, podporuje vaginálnu flóru a môže sa používať počas pohlavného styku na podporu prirodzenej vlhkosti pošvy.

Ako Multi-Gyn LiquiGel účinkuje

Multi-Gyn LiquiGel je gél bez obsahu hormónov na báze prírodného 2QR komplexu. Účinne rieši vaginálnu suchosť a podráždenie jemným, no účinným spôsobom. Multi-Gyn LiquiGel vytvára na stenách pošvy príľnavý film, ktorý zabezpečuje dlhotrvajúcu hydrataciu a zdravie vaginálnej flóry. Pravidelné použitie zdravotníckej pomôcky Multi-Gyn LiquiGel znižuje podráždenie spôsobené vaginálnou suchosťou.

Pokyny na použitie

Pri vaginálnej suchosti aplikujte dostatočné množstvo zdravotníckej pomôcky Multi-Gyn LiquiGel aspoň raz denne alebo kedykoľvek potrebujete pocítiť úľavu. Pri suchosti vonkajšej intímnej oblasti (vulvy) môžete Multi-Gyn LiquiGel aplikovať prstom. Pred aplikáciou gélu a po nej si vždy umyte ruky. Na vnútornú aplikáciu je možné použiť špeciálny aplikátor.

Obsah balenia

Tuba s 50 ml gélu Multi-Gyn LiquiGel + aplikátor + návod na použitie

Upozornenie

Ak vaše ťažkosti pretrvávajú alebo sa opakované vracajú, obráťte sa na svojho lekára.

Multi-Gyn LiquiGel je zdravotnícka pomôcka na báze prírodných zložiek.

Toto unikátne zloženie neobsahuje hormóny, zložky živočíšneho pôvodu ani parfumy.

Zložky

Voda, 2QR komplex* 25 %, glycerín 25 %, betain, xantánová guma, kaprylylglykol, levulínat sodný, anizát sodný, kyselina citrónová, benzoat sodný, sorban draselný
*Extrahované z výťažku z listov Aloe Barbadensis.

Informácie týkajúce sa alergií

Alergie na zložky prípravku Multi-Gyn LiquiGel sú veľmi zriedkavé. V prípade alergií na niektorú zo zložiek prípravku Multi-Gyn LiquiGel nepoužívajte.

Vedľajšie účinky a kontraindikácie

Multi-Gyn LiquiGel má zloženie na prírodnej báze. Multi-Gyn LiquiGel nie je antikoncepcia a neobsahuje žiadne spermicidy. Vplyv na aktivitu spermií sa však neskúma. Preto v prípade, že chcete otehotnieť, odporúčame nepoužívať Multi-Gyn LiquiGel v období ovulácie.

Dôležité

Ak po aplikácii pocítite pálenie a/alebo brnenie, neznepokojujte sa. Je to normálne a rýchlo to prejde.

Interakcia s liekmi

Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie použitia prípravku Multi-Gyn LiquiGel počas tehotenstva a dojčenia. O možnostiach použitia sa poraďte so svojím lekárom.

Použitie s kondómami a pesarmi

Multi-Gyn LiquiGel sa nemá používať súčasne s kondómami. Účinok na pesary nie je známy.

Použitie s tampónmi a vaginálnymi výplachmi

Multi-Gyn LiquiGel sa neodporúča používať súčasne s tampónmi a vaginálnymi výplachmi. Tie môžu (časť) zdravotníckej pomôcky Multi-Gyn LiquiGel z pošvy odstrániť, a tým znížiť jej účinnosť.

Skladovanie


Uchovávať Multi-Gyn LiquiGel pri teplote od 10 °C do 25 °C (izbová teplota).

Uchovávať Multi-Gyn LiquiGel mimo dosahu detí. Nepoužívajte Multi-Gyn LiquiGel po uplynutí dátumu expirácie.

Multi-Gyn LiquiGel je určený na vonkajšie a vnútorné použitie

• Vonkajšie použitie


Pri suchosti vonkajšej intímnej oblasti (vulvy) môžete Multi-Gyn LiquiGel aplikovať prstom. Pred aplikáciou gélu a po nej si vždy umyte ruky.

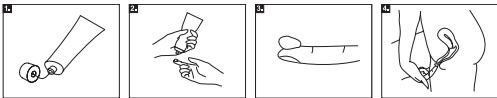


1. Vezmite tubu do jednej ruky a ukazovák druhej ruky držte v blízkosti tuby tak, ako je to znázornené na obrázku.
2. Jemne tubu stlačte. Stláčajte ju dovtedy, kým nebudete mať na ukazovák dostatočné množstvo gélu, ako je znázornené na obrázku.
3. Množstvo na vašom ukazovaku má byť veľké aspoň ako špička prsta (približne 2 ml).
4. Aplikujte gél na vonkajšiu intímnu oblasť

• Vnútorné použitie

Pri aplikácii gélu do pošvy vám pomôže špeciálny aplikátor. Je súčasťou balenia a možno ho naskrutkovať priamo na tubu. Po použití odskrutkujte aplikátor z tuby a umyte ho teplou vodou. Aplikátor môžete uchovávať samostatne alebo ho môžete nasadiť späť na tubu a uzavrieť uzáverom. Ak dávate prednosť aplikácii prstom, môžete gél do pošvy aplikovať aj bez použitia aplikátora. Umyte si ruky, na špičku ukazováka naneste množstvo veľké aspoň ako koniec prsta a aplikujte gél do pošvy.

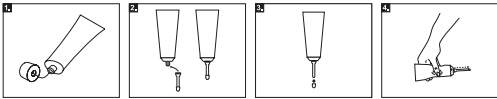

1. Odskrutkujte uzáver z tuby. Pred prvým použitím treba zapečatenú tubu prepichnúť zadnou stranou uzáveru.
2. Naskrutkujte na tubu špeciálny aplikátor, ktorý nájdete v škatuľke.
3. Zložte z aplikátora malý uzáver.
4. Vezmite tubu do jednej ruky a jemne ju stlačte, kým sa na špičke aplikátora neobjaví gél. Keď začne gél vytekať, znamená to, že aplikátor je plný a pripravený na použitie. Vyskúšajte si vopred, koľko gélu vytečie pri jemnom stlačení. Potrebujete množstvo veľké aspoň ako koniec prsta (približne 2 ml).

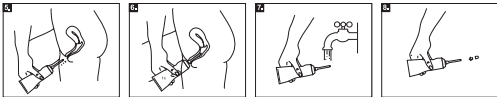

5. Zavedte nasadený aplikátor do pošvy, ako je to znázornené na obrázku. Na uľahčenie zavádzania môžete naniesť malé množstvo gélu na vonkajšiu intímnu oblasť. Aplikátor je menší ako pošva a nepoškodí krčok maternice (vstup do maternice).
6. Jemne tubu stlačte. Potrebujete množstvo veľké aspoň ako koniec prsta. Neexistuje však žiadne obmedzenie ani riziko, ak aplikujete viac.
7. Po použití môžete nechať aplikátor nasadený na tubu a opláchnuť ho teplou vodou.
8. Nasadte späť na aplikátor malý uzáver.

V prípade akejkoľvek závažnej nehody informujte výrobcu a štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Likvidácia: Túto zdravotnícku pomôcku je možné zlikvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ďalšie informácie nájdete aj v miestnych predpisoch.



Официален представител:
МЕДИС ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ул.
Йордан Стратиев 2Г, София 1797,
България / Bulgaria / Bulharsko



TIBER pharm, s.r.o.
A.Lackovej-Zory 527/24
038 21 Mošovce, Slovakia /
Slovakia / Slovensko



BioClin BV, Blaak 555,
3011 GB Rotterdam,
Niderlandia /
Táirle de Jos / Holandsko

www.multi-gyn.com

Дата на преразглеждане юли 2026 /
Data revizii: Iulie 2026 /
Dátum revízie: Júl 2026



0482

2006091_1

